


Narbentherapie und Gel-Druckschutz

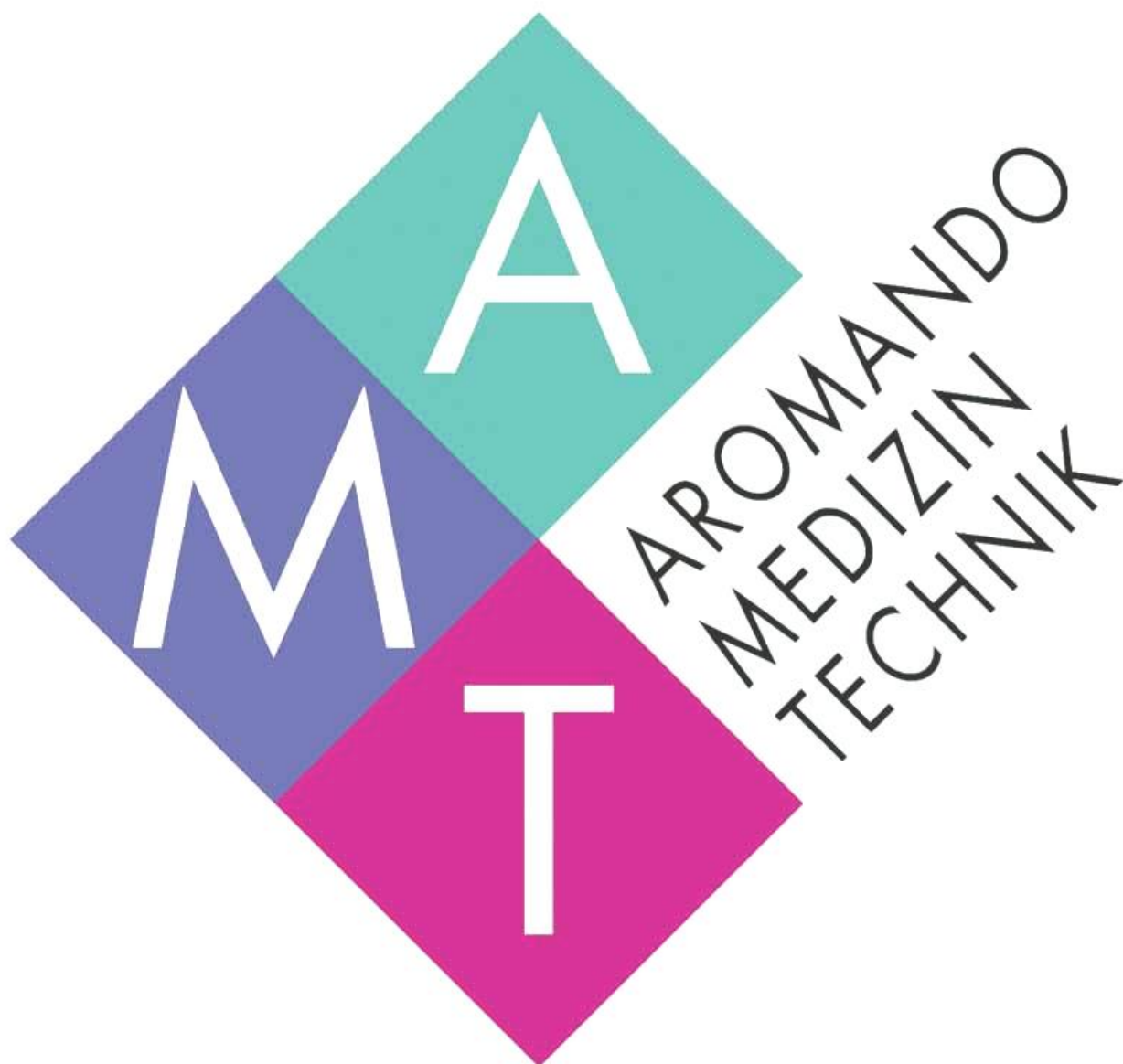

Produktkatalog

Stand: 15. Juli 2020

Kundenservice ☎ *0211 / 862 999 - 0*



INHALTSVERZEICHNIS

Produktbeschreibungen	Seite
ACANTE® Silicon Gel-Folie	1
SILIPOS® Gel-Produkte	2 - 6
Was ist das?	2
Fingerkappen und Schlauchbandagen	3 - 4
Gel-Manschetten und Polster	5
Polster-Materialien für Kreative	6
AGBs	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	7

Produkte erhältlich über Apotheken und Sanitätshäuser



ANSCHRIFT: A M T Aromando Medizintechnik GmbH
Kasernenstr. 21
40213 Düsseldorf

KONTAKT: Telefon: 0211 / 862 999 - 0
Fax: 0211 / 862 999 - 29
Email: info@amt-med.de

Narbentherapie mit Silicon Gel

ACANTE®

selbsthaftende Silicon Gel-Folie

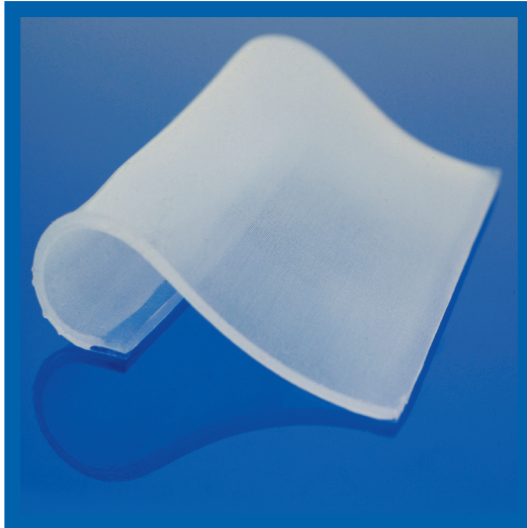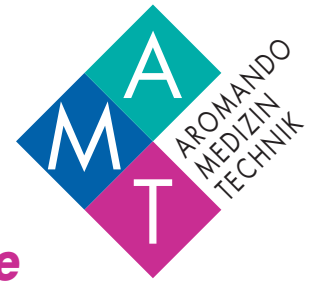

Die optische Erscheinung spielt in der Gesellschaft eine bedeutende Rolle.


Viele medizinische Fachbereiche tragen der Forderung der Patienten nach wirksamer Behandlung in dieser Hinsicht Rechnung. Die ACANTE® Silicon Gel-Folie ist ein ebenso einfaches wie bequemes Verfahren zur Behandlung von hypertrophen Narben und Keloiden. Klinische Studien lassen den Schluß zu, daß Silicon Gel-Folie die Folgen von Verbrennungen, Traumen oder chirurgischen Eingriffen wirkungsvoll vermindern kann.

Die Anwendung der Gel-Folie ist denkbar einfach und einem Pflaster vergleichbar. Die Folie – eine weiche, selbsthaftende Narbenaufgabe aus einem transparenten Film auf Polydimethylsiloxan-Basis – wird entsprechend der Größe der Narbe oder des Keloids so zugeschnitten, daß die Narbe ca. 2 cm über den Narbenrand hinaus abgedeckt ist. Auf

die zu behandelnde Fläche aufgelegt, paßt sie sich den jeweiligen anatomischen Gegebenheiten an. Die ACANTE® Gel-Folie, ist nur für die äußerliche Anwendung auf epithelisierter Haut bestimmt und soll mindestens zwölf Stunden täglich auf der Narbe bleiben. Sie kann vom Patienten zu Hause selbst angebracht und abgenommen werden.

Die ACANTE® Gel-Folie und die Narbe sollen nach jeder Anwendung mit pH-neutraler Flüssigseife gereinigt und mit lauwarmem Wasser abgespült werden. Die Folie kann wiederverwendet werden, solange die Gel-Schicht glatt und unbeschädigt ist. Für die Entsorgung des benutzten Materials sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich.

Die Anwendung auf offenen Wunden, infizierter Haut, bei Wundheilungsstörungen und bei nicht abgeschlossener Epithelisierung ist kontraindiziert.

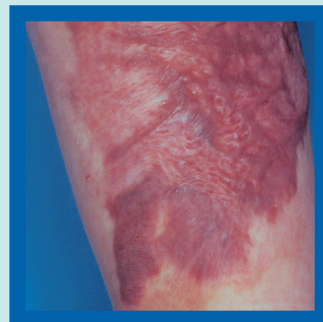

Anwendungsbeispiel für die ACANTE® Gel-Folie

Bei regelmäßiger Anwendung der ACANTE® Gel-Folie können sicht- und spürbare Verbesserungen erzielt werden: Angleichung der Kolorierung, Erhöhung der Narbenflexibilität, Erweichung und Reduktion des Narbengewebes, Nachlassen des Juckreizes. Gleiches gilt bei der prophylaktischen Anwendung gegen die Bildung hypertropher Narben und den Einsatz der Folie in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden wie der Kompressionstherapie.

Diese Informationen sind ausschließlich für die medizinischen Fachkreise bestimmt, nicht für Patienten. Rev. SETH001-2007

Literaturhinweise zur Narbenbehandlung mit Silicon Gel-Folien

■ **Quinn K.J., Evans J.H., Courtney J.M., Gaylor J.D.S.:**

„Non pressure treatment of hypertrophic scars“ | Burns 1985/12, P. 102-108

■ **Quinn K.J.:**

„Silicone gel in scar treatment“ | Burns 1987/12, P. 33-40

■ **Ahn S.T., Monafó W.W., Mustoe T.A.:**

„Topical silicone gel: a new treatment for hypertrophic scars“ | Surgery 1989/106, P. 781-787

■ **McNee J.:**

„The use of silicone gel in the control of hypertrophic scarring“ | Physiotherapy 1990/76, P. 194-197

■ **Ahn S.T., Monafó W.W., Mustoe T.A.:**

„Topical silicone gel for the prevention and treatment of hypertrophic scars“ | Archives of Surgery 1991/126, P. 499-504

■ **Katz B.E.:**

„SILASTIC® Gel Sheeting is found to be effective in scar therapy“ | Cosmetic Dermatology 1992/5, P. 32-34

Die ACANTE® Gel-Folie wird in Deutschland exklusiv von der AMT Aromando Medizintechnik GmbH, Düsseldorf, vertrieben. Sie wird in folgenden Maßen und Packungsgrößen angeboten:


Größe	VE	Katalog-Nr.	PZN
50 x 100 mm	5 Stück	9001 – 0011	0838045
100 x 100 mm	5 Stück	9001 – 0022	0838051
150 x 100 mm	1 Stück	9001 – 0003	6323738
150 x 100 mm	5 Stück	9001 – 0004	6323744
300 x 100 mm	2 Stück	9001 – 0005	6323750
200 x 200 mm	2 Stück	9001 – 0006	6323767
300 x 50 mm	4 Stück	9001 – 0007	8832622
300 x 50 mm	2 Stück	9001 – 0077	2469905
400 x 400 mm	1 Stück	Sondergröße	

AMT Aromando Medizintechnik GmbH




Kasernenstraße 21
D-40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 862 999-0
Telefax: 0211 / 862 999-29
E-Mail: info@amt-med.de
www.amt-med.de

SILIPOS® - Was ist das?

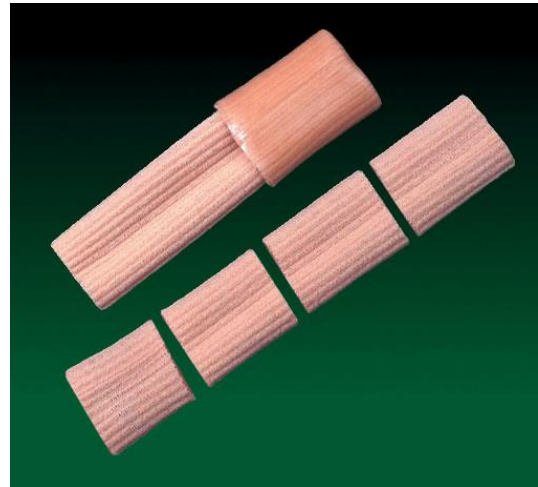

- Alle SILIPOS® Produkte enthalten das einzigartige patentierte **Dreiblock-Polymer-Gel** von SILIPOS®. Es ist durchsetzt mit einem Medical-Grade-Mineralöl.
- Das trotz seiner extremen Elastizität formstabile Gel **absorbiert** vertikalen **Druck und Stoß**, neutralisiert Scherkräfte und Vibration und **schützt vor Reibung** und Abschürfung.
- Das darin enthaltene medizinische **Mineralöl führt der Haut Feuchtigkeit zu**, pflegt sie und macht sie geschmeidig.
- Die SILIPOS® Produkte zeichnen sich durch außergewöhnliche **Hautverträglichkeit** aus. Sie sind hypoallergen und dermatologisch getestet.
- Die SILIPOS® Produkte sind **waschbar und wiederverwendbar** und daher kostengünstig.

Anwendungsbereiche sind:
Narbentherapie, Dekubitusprophylaxe, Ergotherapie.

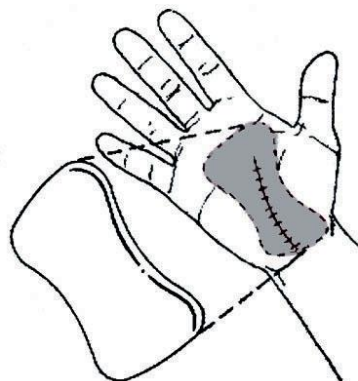

SILIPOS® Fingerkappen und Schlauchbandagen

Fingerkappen (Zehenkappen)

Der stoffüberzogene Gel-Fingerling schützt Operationsnarben, hat eine leichte Kompressionswirkung und empfiehlt sich auch für teilamputierte Finger (Zehen).



Katalog-Nr.

- 10195 Größe Mini, ribbed, 6-Stück-Packung
- 10205 Größe S/M, ribbed, 6-Stück-Packung
- 10206 Größe L/XL, ribbed, 6-Stück-Packung
- 10207 Größe XXL, ribbed, 6-Stück-Packung
- 10235 Größe S/M, mesh, 8-Stück-Packung

*) genaue Abmessungen, siehe Tabelle unten

Fingerkappen und Schlauchbandagen sind in zwei Materialien erhältlich:

ribbed (rechts oben) bietet eine sanfte Kompression in Abhängigkeit von der gewählten Größe.

mesh (rechts unten) ist das elastischere Material von beiden.



Schlauchbandagen

Katalog-Nr.

- 10855 schmal, mesh, 3-Stück-Packung
- 10875 mittel, ribbed, 2-Stück-Packung

Die Schlauchbandagen sind in der Länge beliebig zuschneidbar. Sie sorgen für den Rundumschutz von Fingern und Zehen, und in der Größe breit auch für die Unterarme und Unterschenkel.

Kat.-Nr.	Bezeichnung	Anwendungsbeispiel	Länge	Umfang
10195	Kappe mini	Finger Kleinkind	6,4 cm	3,8 - 6,4 cm
10205	Kappe S/M	Erwachsene kleinere Finger	6,4 cm	4,8 - 7,6 cm
10206	Kappe L/XL	Erwachsene größere Finger	6,4 cm	6,4 - 9,5 cm
10207	Kappe XXL	Großzeh	6,4 cm	7,6 - 11,4 cm
10235	Kappe S/M	Erwachsene kleinere Finger	6,4 cm	4,1 - 7,6 cm
10855	Bandage schmal	Erwachsene kleinere Finger	15,2 cm	4,4 - 7,0 cm
10875	Bandage mittel	Erwachsene größere Finger	15,2 cm	6,4 - 10,8 cm

SILIPOS® Schlauchbandagen und Handschuhe


Schlauchbandage breit

Katalog-Nr. 10845

Größe breit (Maße, siehe unten)

1-Stück-Packung

Die Schlauchbandage ist in der Länge beliebig zuschneidbar.
Sie ist geeignet für die Anwendung an Füßen, Ellenbögen, Unterarmen und Unterschenkeln, und hat darüber hinaus eine leichte Kompressionswirkung.

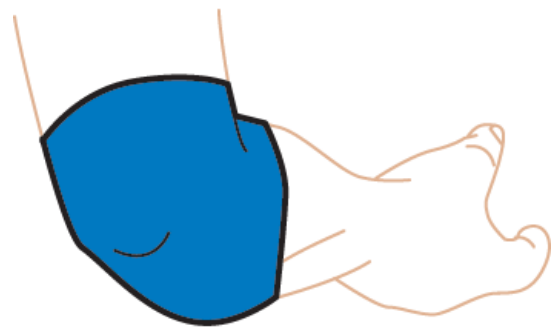

Katalog-Nr.	Länge	Breite, flach	Umfang	Umfang gedehnt
10845	25,4 cm	7,6 cm	15,2 cm	25,4 cm



Gel Therapie-Handschuhe

Katalog-Nr. 786

Erwachsenen-Einheitsgröße, 1 Paar

Nylon-Handschuh, der innen nahtlos mit Gel beschichtet ist.
Ideal bei Verbrennungen und zum Schutz nach Handoperationen.

SILIPOS® Gel-Manschetten und Polster

Carpal-Manschette

Katalog-Nr. 14115 klein, links
14125 klein, rechts
14135 groß, links
14145 groß, rechts

Nylon-Manschette mit eingearbeitetem Gel-Polster zur Abdeckung von Inzisionen an Handgelenk und Innenhand nach Carpal tunneloperationen.

Ab 23 cm Handrückenumfang Größe ‚groß‘ verwenden.





Carpal-Polster

Katalog-Nr. 14205

Einheitsgröße (ca. 5 x 11 cm), 3-Stück-Packung

Gel-Polster mit selbstklebender Rückseite zur Fixierung in einem Verband oder einer Schiene nach Carpal tunneloperationen. Als Pelotte zu verwenden.

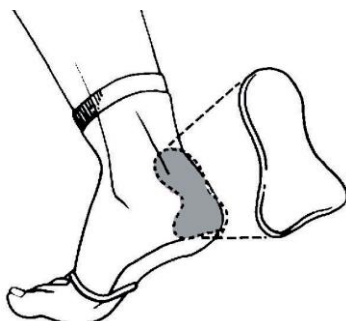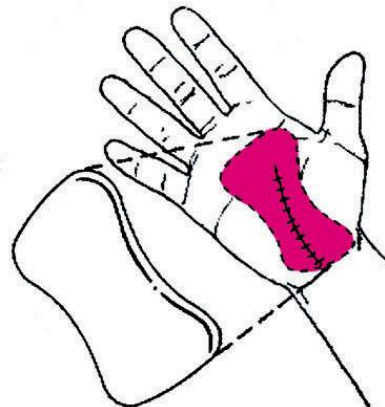

Achillesfersen-Manschette

Katalog-Nr. 10385 Größe S/M
10395 Größe L/XL

1-Stück-Packungen

Das Gel-Polster schützt speziell den Bereich der Achillesferse.

SILIPOS® *Polster-Materialien für Kreative*

Schon seit langem hat SILIPOS® erkannt, daß im Alltag von Orthopädietechnikern und Sanitätshäusern Produkte gefragt sind, die bei der Problemlösung Raum für kreative Fähigkeiten bieten. Die Antwort sind die SILIPOS® Polster-Materialien.

Polsterplatten


mit Stoffbezug, einseitig

15605 20 x 20 cm **15705** 30 x 40 cm **15805** 40 x 50 cm

mit Stoffbezug, beidseitig

15615 20 x 20 cm **15715** 30 x 40 cm **15815** 40 x 50 cm

ca. 3 mm starkes Gel-Polster, als Unterlage für bettlägerige Patienten zur Dekubitusprophylaxe, zur Einarbeitung in Schuhe und für vieles mehr

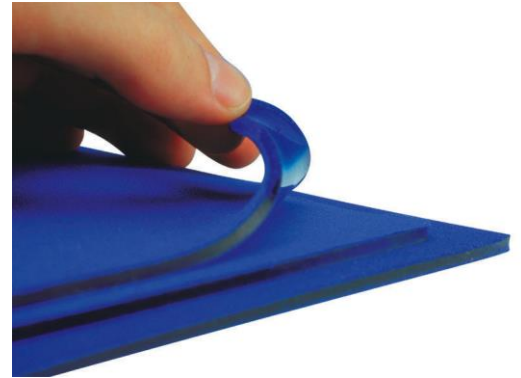

Halbbeschichtete Schlauchbandage

Katalog-Nr. 10925 7,62 cm x 3,048 m
10935 10,16 cm x 3,048 m
10945 12,70 cm x 3,048 m

auf Rolle, neue verbesserte Version,
ideal zur Anwendung an Arm und Bein,
zum Zuschneiden auf die gewünschte
Länge

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Umfang der Lieferungen und des Vertragsabschlusses

1. Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen erkennt jeder Käufer durch Erteilung seines Auftrages als rechtlich bindend an.
2. Für den Umfang der Lieferungen und Leistungen sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Ist ein Vertrag geschlossen worden, ohne dass solche beiderseitigen Erklärungen vorliegen, so ist entweder die schriftliche Auftragsbestätigung der AMT Aromando Medizintechnik GmbH (im Folgenden AMT), falls eine solche nicht vorliegt, der schriftliche, vorbehaltslose Auftrag des Bestellers maßgebend.
3. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten neben den gesetzlichen Vorschriften die anerkannten Normen und die in Deutschland geltenden Standards oder Bestimmungen. Für eine etwaige erforderliche Prüfung und Abnahme der Lieferteile nach ausländischen technischen Standards und Bestimmungen hat in jedem Falle der Käufer zu sorgen.

§ 2 Preise

1. Die in den Preislisten und Angeboten genannten Preise sind freibleibend. Es gelten die in der Auftragsbestätigung oder bei etwaiger Ermangelung dieser die in den Rechnungen aufgeführten Preise.
2. Die Preise verstehen sich mit Gültigkeit des Tages der Lieferung soweit nichts anderes vereinbart wurde, rein netto zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Sie verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wurde, in Euro.
3. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten für Lieferungen ab einem Warennettowert von € 300,00 bei Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten (Porto und Verpackung) als im Preis enthalten. Bei einem darunter liegenden Warennettowert werden von AMT die Versandkosten zusätzlich in Rechnung gestellt.
4. Kosten für eine Transportversicherung sowie sonstige zusätzliche Leistungen sind in den Preisen nicht enthalten.
5. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind die Kosten für die Entsorgung und stoffliche Wiederverwertung von Verpackungen jeder Art in den Preisen berücksichtigt. Zusätzliche Kosten können von Seiten des Käufers gegenüber AMT nicht geltend gemacht werden.

§ 3 Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt

1. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum kostenfrei an AMT netto Kasse zu zahlen.
2. Scheckzahlungen werden nur vorbehaltlich ihrer Einlösung zahlungshalber angenommen.
3. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, behält sich AMT das Recht vor, Verzugszinsen in Höhe von 4% p.a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen, soweit AMT keinen höheren Verzugschaden vorweist. Ebenfalls findet das Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen Anwendung.
4. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von AMT, auch für den Fall der Weitergabe im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes. Weitergehende Verfügungen (Verpfändungen, Sicherungsübereignung oder Verkauf nach erfolgter Zahlungseinstellung) sind nicht gestattet.
5. Bei Zahlungsverzug kann AMT Herausgabe der dem Eigentumsvorbehalt unterfallenden Waren verlangen und vom Vertrag zurücktreten.

§ 4 Lieferfrist und Lieferbedingungen

1. Hinsichtlich der Frist zur Lieferung sind die beidseitigen Vereinbarungen maßgebend, bei Ermangelung dieser gelten sie als unverbindlich. Die Lieferfrist gilt mit der Anzeige der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung ohne Verschulden von AMT unmöglich ist.
2. Bei Verzug durch AMT ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zusetzen. Rücktritt und Wandelung des Vertrages ist dem Käufer nur nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Nachfrist gestattet.
3. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, so wird ihm, beginnend 30 Tage nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat in Rechnung gestellt.

4. Sonderanfertigungen für den Käufer müssen von diesem innerhalb der vereinbarten Frist angenommen und gezahlt werden.
5. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist AMT berechtigt, bis zur Entrichtung der fälligen Beträge weitere Lieferungen zurückzubehalten. Dies gilt auch dann, wenn der Käufer anderen Verpflichtungen aus diesem oder anderen Verträgen nicht rechtzeitig nachkommt.
6. Teillieferungen sind stets zulässig, wie die Ausstellung entsprechender Teilrechnungen.
7. Die Rückgabe gelieferter Ware ist, soweit nicht berechnete Mängelrügen vorliegen, unzulässig, soweit hierüber keine gesonderten Vereinbarungen mit AMT schriftlich getroffen wurden. Die Rücklieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Eine etwaige Gutschrift erfolgt unter Abzug der vorgenannten Kosten und einer angemessenen Bearbeitungsgebühr.

§ 5 Gefahrenübergang und Erfüllung

1. Der Versand zum vertraglich vorgesehenen oder vom Käufer aufgegebenen Bestimmungsort erfolgt auf Gefahr des Käufers.
2. Ebenfalls geht die Gefahr der Lieferung von der Gattung nach bestimmten Waren stets an den Käufer über, sobald die Sendung an den ersten Frachtführer oder Spediteur übergeben wird.
3. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.
4. Etwaige Schadensreklamation hat der Käufer unverzüglich vom Anlieferer bestätigen zu lassen bzw. in geeigneter Form dem Transportunternehmen mitzuteilen.

§ 6 Gewährleistung

1. AMT leistet in der Weise Gewährleistung für die Güte ihrer Erzeugnisse, dass sie innerhalb von 12 Monaten vom Tage des Gefahrenübergangs auftretende Herstellungs- oder Materialfehler wahlweise durch Nachbesserung, Ersatz des Minderwertes oder Ersatzlieferung nach Wahl von AMT aufkommt. AMT kann die Mängel auch dadurch beseitigen, in dem sie ersatzweise ein anderes, gleichwertiges und für den Verwendungszweck bestimmtes Produkt ausliefert.
2. Für Produkte, deren Laufzeit aufgrund des angegebenen Verfalldatums kürzer ist als 12 Monate, gilt die Gewährleistung maximal bis zum angegebenen Verfalldatum.
3. Der Käufer hat die Ware unverzüglich bei Entgegennahme zu prüfen und bei Feststellung von Mängeln diese innerhalb von 14 Tagen AMT schriftlich mitzuteilen.
4. Wenn die Mängel auf Maßnahmen oder Konstruktionen zurückzuführen sind, die der Käufer ausdrücklich verlangt hat, haftet AMT nicht.
5. Für Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung von AMT auf die Abtretung der AMT gegenüber den Unterlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüchen.

§ 7 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Als Erfüllungsort für die Verpflichtungen des Käufers gilt Düsseldorf.
2. Bestellungen und Lieferungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung der internationalen Kaufrechtsgesetze ist ausgeschlossen.
3. Alleiniger Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Düsseldorf.

§ 8 Schlussbestimmungen

1. Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer der vorgenannten Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ist eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen unwirksam, so ist diese durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck und der Entsprechung der Vertragsbedürfnisse der unwirksamen Bestimmung am besten gerecht wird.
2. Abänderungen oder Ergänzungen zu diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Düsseldorf, 1. Januar 2003

A M T Aromando Medizintechnik GmbH
Telefon 0211 / 862 999 - 0

Kasernenstr. 21 D-40213 Düsseldorf
Fax 0211 / 862 999 - 29

Amtsgericht Düsseldorf HRB 30109 Geschäftsführerin: Heidemarie Aromando Ust.ID-Nr. DE 811549958