


# Matbox® II



## Instrumententasche zur Sterilisation

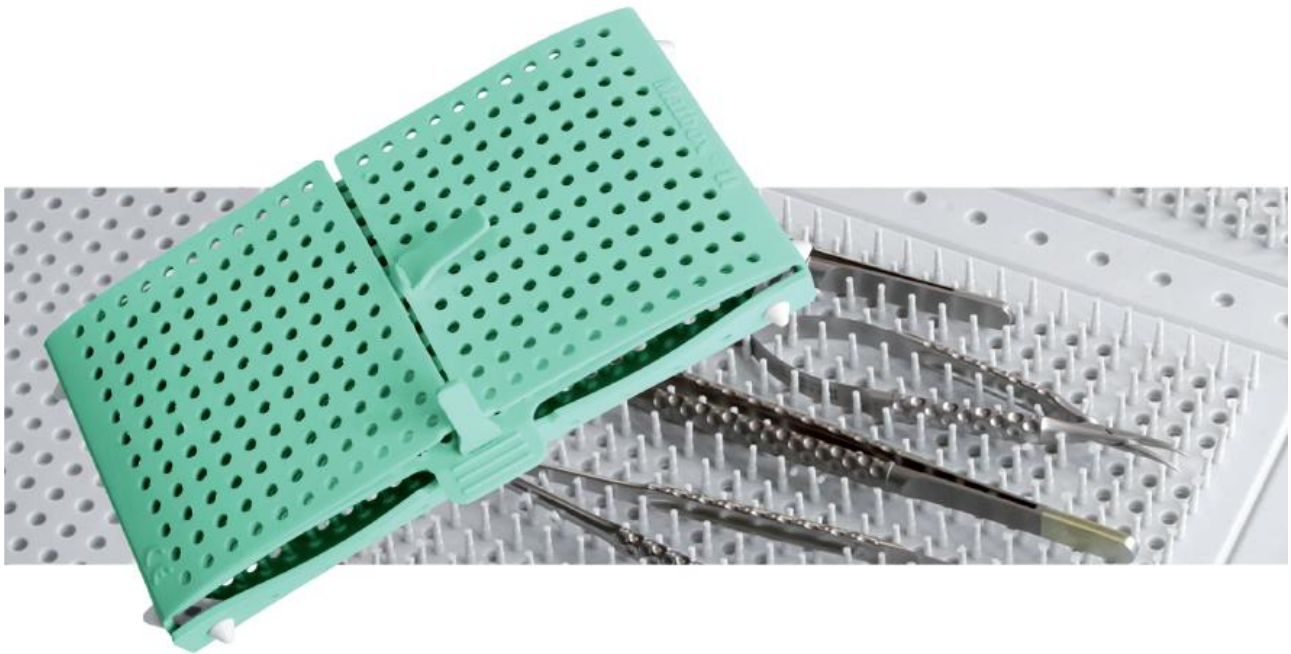


Matbox® II ist eine einteilige Siliconmatte, die sich im Handumdrehen zum Steribehältnis verwandeln lässt, das Ihre chirurgischen Instrumente sicher transportiert und verwahrt.




### Technische Daten

- Nutzbare Fläche: 100 x 195 x 20 mm
- Gesamtmaße: 115 x 215 x 28 mm
- platinvernetztes Siliconelastomer
- Härtegrad: 70 Shore A
- Siliconelastomer nach USP VI & ISO 10993
- Farbanteil: weniger als 1% (FDA zugelassen)

### Verfügbar in einer breiten Farbpalette

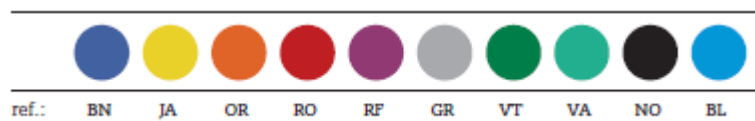

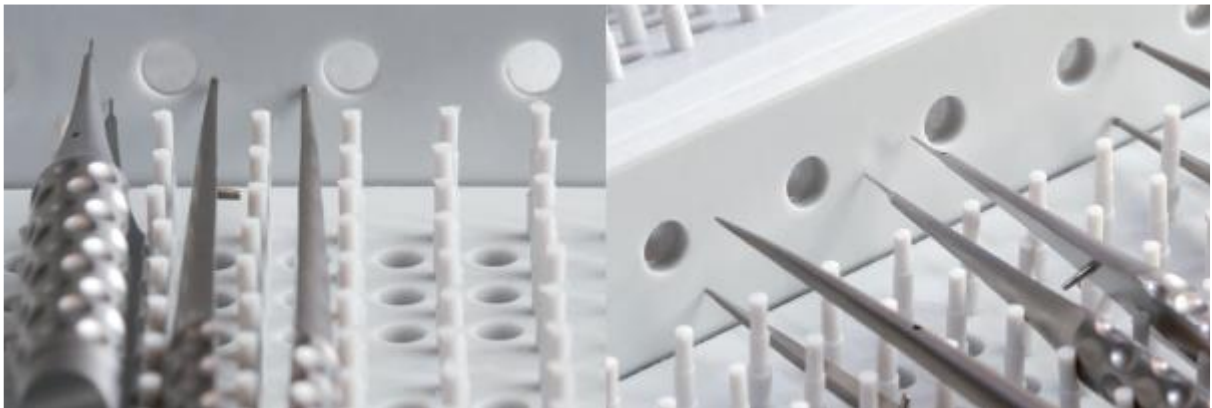

Das Innere von *Matbox® II* ist mit Silicon Spikes ausgestattet. Die Spikes sind biegsam, sie befinden sich auf beiden Innenseiten der Tasche und verhindern ein Herausfallen der Instrumente.



<b>Katalog-Nr.</b>	<b>Farbe</b>
MBX-BN	dunkelblau
MBX-JA	gelb
MBX-OR	orange
MBX-RO	rot
MBX-RF	rosa
MBX-GR	grau
MBX-VT	dunkelgrün
MBX-VA	hellgrün
MBX-NO	schwarz
MBX-BL	hellblau

**Hersteller:**  
AREX® sarl  
3, Allée du Clos Tonnerre  
91120 Palaiseau, Frankreich

CE 0459

**Vertrieb in Deutschland:**  
AMT Aromando Medizintechnik GmbH  
Galmer Str. 14 14943 Luckenwalde  
Tel. 0211 / 862 999 0  
Email: [info@amt-med.de](mailto:info@amt-med.de)

